

Banc de traction — fiche étudiant

SAUTER TVM 5000N230N · l'appli mesure la force, elle ne commande pas le vérin

SÉCURITÉ — pas de relais de coupure

Si un bandeau rouge « ARRÊTER LA MACHINE » s'affiche : STOP immédiat sur le pupitre TVM.

Limite 4000 N. Cette page n'arrête pas le moteur. Le mouvement se commande uniquement au pupitre.

1 Joindre le Wi-Fi du banc




SSID : TVM-TRACTION

Mot de passe : traction1

Le téléphone dira « Pas d'Internet » : rester connecté.

2 Ouvrir l'application

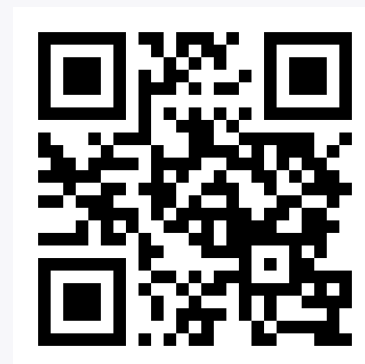

<http://192.168.4.1>

Pastille verte « ESP32 » = connexion OK.

Sinon : bouton Reconnecter ESP32.

Utiliser l'appli

3 Tare

Onglet Traction (ou Fatigue). Pincés vides ou sans charge utile → Tare. La force doit passer près de 0 N.

5 Démarrer

Appuyer sur Démarrer. Puis lancer la descente uniquement sur le pupitre TVM (10–230 mm/min).

7 Alarme rouge

$F \geq 4000 \text{ N}$ → STOP immédiat au pupitre TVM. L'enregistrement continue, le moteur pas.

4 Nommer

Indiquer le nom de l'éprouvette (ex. PLA-01). Il sera dans le nom du fichier CSV.

6 Pendant l'essai

L'appli trace $F(t)$ et $F_{\max}$. À la rupture : détection auto, ou bouton Rupture manuelle.

8 Fin

Arrêter l'enreg. → CSV (Excel FR) et/ou PNG. Fatigue : Repeat + butées au TVM, puis Démarrer comptage.